

「EZ JET ボールブラシ」(一般医療機器) 新発売のお知らせ

- 内視鏡スコープの洗浄作業における医療従事者の負担軽減のために -

株式会社サンオクス(本社:東京都文京区白山、代表取締役 太川 玉緒、以下「サンオクス」)は、Silvertech CO.,LTD(本社:韓国、以下「Silvertech」)が内視鏡スコープの洗浄作業における医療従事者の負担軽減のために開発した「EZ JET Ball Blush」(<http://ezjet.kr/ez-jet/>)の日本での開発を進めてまいりましたが、このたび、「EZ JET ボールブラシ」(一般医療機器)として発売いたします。

第94回日本内視鏡技師学会の展示会(2026年5月9日)にて、御要望を頂いた医療機関から販売を開始し、今後、全国の医療機関への導入を進めてまいります。


当社は今後も、医療従事者の負担軽減と医療環境の改善に貢献する製品開発を継続してまいります。

製品概要

項目	内容
製品名	EZ JET ボールブラシ
医療機器分類	一般医療機器 器具除染用洗浄器 (35424000)
製造販売届出番号	13B2X10465000002
製造販売会社	株式会社サンオクス
外国製造業者	Silvertech Co.,Ltd. (韓国)
使用目的	内視鏡スコープ内部のベッドサイド洗浄に使用する単回使用ボールブラシ

〈原理〉

内視鏡検査直後に、ボールブラシを内視鏡洗浄の酵素洗剤液とともに吸引することで内視鏡チャンネル内表面をブラッシングする。

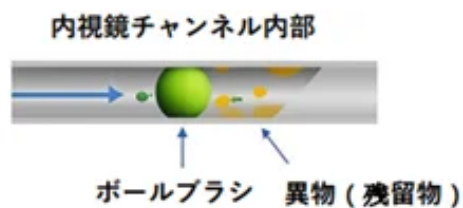

〈形状・構造〉



型名	適用可能な内視鏡チャンネル口径	カラー
EZBB-20	2.0mm	ハバナブラン
EZBB-22	2.2mm	マドンナブルー
EZBB-24	2.4mm	デザートダスト
EZBB-28	2.8mm	ピンク
EZBB-32	3.2mm	グリーン
EZBB-37	3.7mm	イエロー

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社サンオクス

TEL：0570-00-3094

E-mail：EZBB@sunocs.co.jp

株式会社サンオクスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/108408

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社サンオクス

メールアドレス：masayuki-ono@sunocs.co.jp